

500bp DNA Marker


产品说明:

500bp DNA Marker 包含九条双链 DNA, 分别为 500bp、1.0kb、1.4kb、2.0kb、2.1kb、3.0kb、4.2kb、5.6kb 及 7.6kb。适合于做为琼脂糖及聚丙烯酰胺凝胶电泳的分子量标准。建议每次上样量为 5 μ l (每 1mm 加样孔宽度约加 1 μ l)。

本产品使用时需加上样缓冲液, 不要加热。

产品内容与储存方法:

名称	数量	保存条件
500bp DNA Marker	250 μ l (50次)	4 $^{\circ}$ C (短期), -20 $^{\circ}$ C (长期)

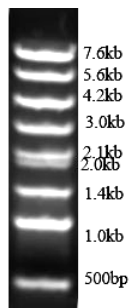

0.8% agarose gel